



## AutoScript – מדריך ליצירת קובץ ניסוי

- קובץ ניסוי הוא קובץ ZIP שמכיל את כל המידע לגבי הניסוי – קבצי האודיו הנחוצים, רשימת המילים ואופן הרצת הניסוי.
- יש להצטייד בהקלטה או מספר הקלטות המכילות את מילות הניסוי, מוקראות אחת אחרי השניה. כדאי לסדר את ההקלטות כך שכל הקלטה מכילה מילים השייכות לקבוצה אחת (לפי תנאי הניסוי).

1. התקנה – יש לחלץ את התיקיה מהZIP. על מנת להפעיל את התכנה יש לפתוח את הקובץ TouchpadExperiment.application.
2. מסך ראשי – תפריט ניווט בין 3 חלקי האפליקציה. כדי להגיע למסך יצירת קובץ הניסוי יש ללחוץ create a new experiment.

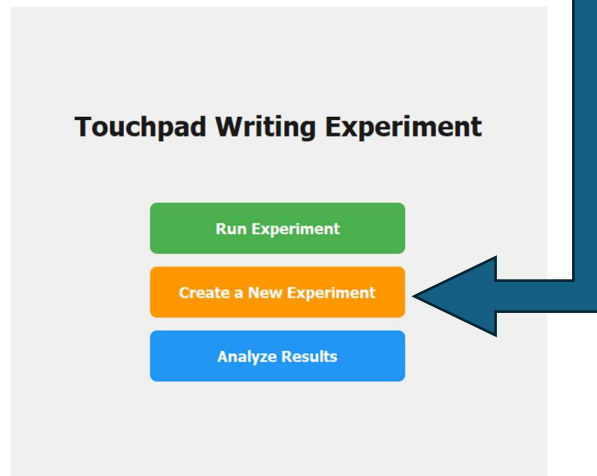

3. לאחר הלחיצה מגיעים למסך יצירת הניסוי. אפשר להשתמש בכפתור Load Experiment כדי לטעון ניסוי קיים, או להתחיל מ־0. יש להעלות את הקלטות/הקלטות מילות הניסוי בעזרת הכפתור upload audio files.
4. התוכנה תחתוך את ההקלטה למילים נפרדות אוטומטית. שם ההקלטה יהיה שם קבוצת המילים (הקבוצות מפורטות בחלון המסומן בירוק). המילים המופרדות יפורטו בחלון המסומן בסגול. קליק כפול על מילה משמיע את קובץ הקול שמשוייך אליה. ניתן להשתמש בכפתורים edit slice, delete slice, insert word, delete selected כדי לערוך, למחוק או להוסיף מילים – אם החיתוך האוטומטי לא מוצלח.
5. בחלון המסומן בצהוב יש להזין את רשימת המילים הכתובות, באותו סדר בו הן מופיעות במקור. שורה חדשה לכל מילה.

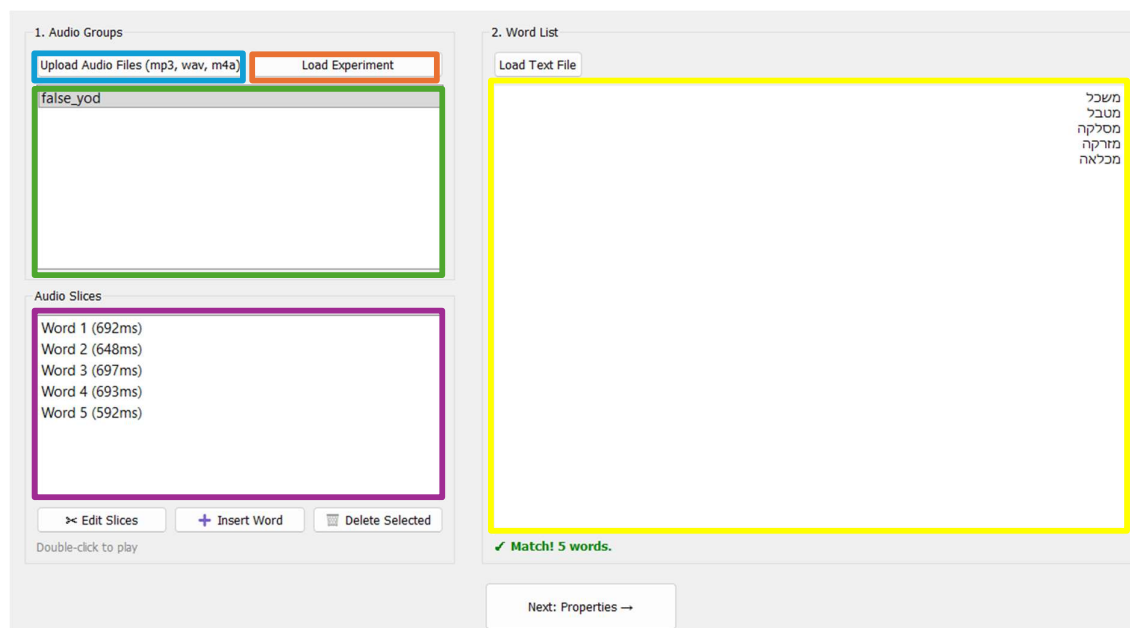

6. לאחר לחיצה על next יש להגדיר את יתר הגדרות הניסוי: שם הניסוי, גודל גריד הכתיבה (מומלץ 5\*5), הקראה סדורה או אקראית, זמן מעבר בין מילה למילה/המתנה למקש, מספר חזרות על כל קבוצת מילים והשמעת "ביפ" לפני/אחרי המילה.
7. לחיצה על הכפתור Export experiment package תייצא קובץ ZIP עם שם הניסוי. עכשיו אפשר לחזור למסך הראשי, לבחור ב run experiment ולבחור בקובץ הניסוי החדש.